



Speloplossingen

Oog voor veiligheid



 bevoplast bv

Oog voor veiligheid

Effectieve eerste hulp bij oog- en lichaamsverwondingen

Het gezichtsvermogen is één van onze belangrijkste zintuigen.

Bij ongevallen kunnen enkele seconden bepalend zijn voor behoud van het gezichtsvermogen. Daarom is het belangrijk dat een oogspoelfles snel bereikbaar is op alle werkplaatsen waar een risico op oogverwondingen is.

Ongevallen met chemische stoffen

Bij ongevallen met zuren en alkaliën begint de aantasting van het oog al op het moment dat de schadelijke stof in contact met het oog komt.

Wij adviseren hier het gebruik van de pH neutraal oplossing. Dit product bevat een steriele fosfaatoplossing (4,9%), die zorgt voor een snelle neutralisatie van de schadelijke stof, zodat de natuurlijke pH-waarde in het oog van 7.4 weer bereikt wordt.

Ongevallen met schadelijke stoffen en deeltjes

Bij verwondingen veroorzaakt door metaal- of houtsnippers, stof en vuil etc. is tijd ook een belangrijk aspect. Bij deze verwondingen kan door het snelle gebruik van de oogspoeloplossing voorkomen worden, dat schadelijke deeltjes in het oog blijven vastzitten en daardoor zware oogbeschadiging wordt veroorzaakt. De Plum oogspoeling bevat een steriele sodium chloride oplossing (0,9%), die overeenkomt met het natuurlijke zoutgehalte van het oog. Het binnendringen van kiemen en bacteriën, die tot infecties aan het oog kunnen leiden, wordt hiermee voorkomen. Bij de spoeling met niet-steriele vloeistoffen (b.v. kraanwater) is dit geen garantie.

Voordelen van het Plum oogspoelsysteem:

Werkzame spoeloplossingen

Geschikt bij het binnendringen van schadelijke deeltjes en ter neutralisatie van chemische stoffen in het oog of op het lichaam.

Flexibele systeemoplossingen

Het ruime assortiment biedt voor elke specifieke bedrijfssituatie de optimale oplossing. De producten kunnen los worden geleverd, inclusief wandhouder of als complete stations in verschillende formaten en geschikt voor bevestiging aan de muur. Ideaal voor op b.v. werkplaatsen en om in voertuigen, gereedschapskisten, verbandkoffers, of in de speciale Plum heuptas mee te nemen.

Steriel en hygiënisch


Ongeopend is de vloeistof tot 3 jaar houdbaar. Er is geen onderhoud of reiniging van de flessen noodzakelijk. De houdbaarheidsdatum staat op het etiket vermeld.

Snel en eenvoudig in gebruik

In geval van een ongeluk is de spoeling van het oog of het lichaam in slechts een paar seconden mogelijk. De duidelijke gebruiksaanwijzingen en illustraties staan op het etiket vermeld.

Hoge functionaliteit

De ergonomisch gevormde oogschaal past precies op het oog en zorgt voor een zachte en gelijkmatige spoeling. Een CE-certificering conform de eisen voor medische instrumenten. De flessen voldoen aan de DIN 12930 normering.

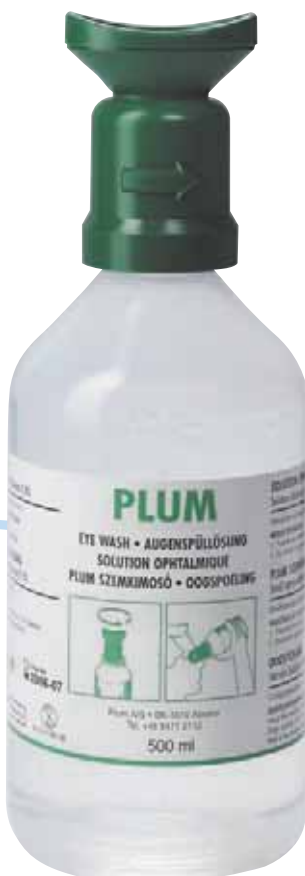

Simpel • Veilig • Flexibel

Spoeloplossingen bij vuil en stof



500 ml Plum Oogspoelfles



Fles met steriele sodium chloride oplossing (0.9%). Voorzien van ergonomisch gevormde oogschaal en stofkap. De fles is geschikt voor het navullen van oogspoelstations en voor los (eenmalig) gebruik.

Spoeltijd: ca. 5 minuten
Art. nr. PLUM 004604

Besteleenheid: 12 st.

Houdbaarheid: 3 jaar.
Volgens DIN 12930

200 ml Plum Oogspoelfles



Een handzame fles met een steriele sodium chloride oplossing (0.9%). Voor mobiel gebruik in b.v. een verbandkoffer, gereedschapskist of de speciale heuptas die hiervoor ontwikkeld is. Voorzien van ergonomisch gevormde oogschaal en stofkap.

Spoeltijd: ca. 2 minuten
Art. nr. PLUM 004691

Besteleenheid: 10 st.

Houdbaarheid: 3 jaar.
Volgens DIN 12930

Plum Oogspoelstation met 1 fles



Wandstation met 1 x 500 ml fles, wandhouder en instructiekaart. Vooral geschikt voor kleinere en mobiele werkplaatsen waar oogspoeling ter plaatse noodzakelijk is.

Spoeltijd: ca. 5 minuten
Art. nr. PLUM 004611

Besteleenheid: 1 st.

Afm. instructiekaart (hxbxd):
300 mm x 90 mm x 3 mm

Afm. wandhouder (hxbxd):
35 mm x 80 mm x 57 mm

Plum Oogspoelstation met 2 flessen



Een handig wandstation met 2 x 500 ml flessen, wandhouder en geïntegreerde instructies. Het station is tevens uitgevoerd met een spiegel en maakt een correcte en snelle spoeling mogelijk op plaatsen waar een langere spoeltijd noodzakelijk is.

Spoeltijd: ca. 10 minuten
Art. nr. PLUM 004694

Besteleenheid: 1 st.

Afm. wandstation (hxbxd):
290 mm x 230 mm x 80 mm

Plum Oogspoelstation wandbox



Een stofdichte wandbox met 2 x 500 ml flessen, geïntegreerde instructies en een spiegel. Vooral geschikt voor werkplekken waar veel vuil of stof is.

Op aanvraag leverbaar:
Verwarmbare wandbox

Spoeltijd: ca. 10 minuten
Art. nr. PLUM 004650

Besteleenheid: 1 st.

Afm. wandbox (hxbxd):
265 mm x 227 mm x 110 mm

Heuptas voor 200 ml oogspoelflessen



Een praktische tas om aan een riem of overal etc. te bevestigen. Beschermt de flessen tegen vervuiling. In geval van eerste hulp zeer gemakkelijk en snel te openen. Uitgerust met klittenbandsluiting en markering van de oogspoelinrichting.

Art. nr. PLUM 004692

Besteleenheid: 10 st.

Afm. heuptas (hxbxd):
80 mm x 175 mm x 85 mm

Spoeloplossingen bij chemische stoffen



200 ml fles pH Neutraal



Een handzame fles met steriele fosfaatoplossing (4,9%). Voor de snelle neutralisatie van chemische stoffen zoals zuren en alkaliën. Voor mobiel gebruik in b.v. een verbandkoffer, de speciale heuptas of gereedschapskist. Voorzien van ergonomisch gevormde oogschaal en stofkap.

Spoeltijd: ca. 2 minuten
Art. nr. PLUM 004752

Besteleenheid: 10 st.

Houdbaarheid: 3 jaar.
Volgens DIN 12930

1000 ml pH Neutraal



Een fles met 1000 ml pH fosfaatoplossing, die sterke zuren en alkaliën op de huid snel en effectief neutraliseert. Tot 50 maal werkzamer als leidingwater. Uitgerust met een speciale sproeikop die de vloeistof snel en gelijkmatig over een groot gedeelte van het lichaam verdeelt. Geschikt voor bij een werkbank of in b.v. een gereedschapskist of vrachtwagen. Ook geschikt voor het navullen van een station.

Spoeltijd: ca. 2 minuten
Art. nr. PLUM 004746

Besteleenheid: 1 st.

Houdbaarheid: 3 jaar.
Volgens DIN 12930

Oogspoelstation



Wandstation met 1 x 200 ml pH neutraal en 1 x 500 ml Plum oogspoeloplossing, geïntegreerde instructies en spiegel. Vooral geschikt voor werkplaatsen waar chemicaliën en losse deeltjes in het oog kunnen geraken. **Tip:** Ook na de spoeling met pH neutraal wordt tot aan de doktersbehandeling een voortzetting van de spoeling met Plum oogspoeloplossing geadviseerd. Inclusief oog-noodplan.

Spoeltijd: ca. 7 minuten
Art. nr. PLUM 004770

Besteleenheid: 1 stuk

Afm. wandstation (hxbxd):
290 mm x 230 mm x 80 mm

1000 ml pH Neutraal station



Wandstation met 1000 ml pH neutraal, wandhouder en instructiekaart. Geschikt om vlakbij een werkplaats te bevestigen. Ook een zinvolle aanvulling op een vaste nooddouche.

Spoeltijd: ca. 2 minuten
Art. nr. PLUM 004741

Besteleenheid: 1 st.

Afm. instructiekaart (hxbxd):
300 mm x 90 mm x 3 mm

Afm. wandhouder (hxbxd):
35 mm x 50 mm x 55 mm

Oogspoelstation wandbox



Stofdichte wandbox met 1 x 200 ml pH neutraal en 1 x 500 ml Plum oogspoeloplossing, instructies en spiegel. Vooral geschikt voor werkplaatsen waar chemicaliën en losse deeltjes in het oog kunnen geraken. **Tip:** Ook na de spoeling met pH neutraal wordt tot aan de doktersbehandeling een voortzetting van de spoeling met Plum oogspoeloplossing geadviseerd. Incl. oog-noodplan.

Spoeltijd: ca. 7 minuten
Art. nr. PLUM 004789

Besteleenheid: 1 st.

Afm. wandstation (hxbxd):
290 mm x 230 mm x 80 mm



Oog - Noodplan

VUIL EN SCHADELIJKE STOFFEN	AANBEVOLEN SPOELING	VOORTGANG SPOELING TOT AAN DOKTERSBEHANDELING	AANBEVOLEN SPOELTIJD
Vreemde voorwerpen b.v. stof, vuil, metaal en houtsplinters	Plum Oogspoeling	Plum Oogspoeling	Ogen ca. 5 min. spoelen tot dat vuil of vreemde voorwerpen uitgespoeld of verwijderd zijn.
Schade door zuren	PH Neutraal	Plum Oogspoeling	Ogen ca. 2 min. spoelen.
Schade door alkaliën	PH Neutraal	Plum Oogspoeling	Ogen ca. 2 min. spoelen.
Schade door andere schadelijke stoffen	Plum Oogspoeling of PH Neutraal	Plum Oogspoeling	Ogen ca. 2 min. spoelen.
Schade door zuren, alkaliën en chemicaliën op de huid	PH Neutraal	Plum Oogspoeling	Huid / betreffende lichaamsdeel spoelen tot dat het onaangename gevoel weg is.



PH Neutraal



Plum Oogspoeling



Flacon uit de houder nemen



Oogschaal in pijlrichting draaien tot verzegeling verbroken is



Hoofd achterover en spoelen

Belangrijk!

Bij elke verontreiniging moet het oog met een zachte en gelijkmatige straal gespoeld worden. De oogspoelflacons tijdens het spoelproces licht indrukken. Bij elk oogletsel of verontreiniging doktersadvies innemen. Het spoelen ook tijdens vervoer naar de arts voortzetten.

Snel en eenvoudig in gebruik bij een calamiteit!



Haal de fles uit de houder.



Draai de oogschaal in de pijlrichting totdat de verzegeling breekt.



Het hoofd achterover houden en spoelen.



Bij losse deeltjes in het oog kan het prettiger zijn om het hoofd licht naar beneden te houden en te spoelen.



Aalbosweg 14
8171 MA Vaassen
Nederland

Postbus 82
8170 AB Vaassen

T. +31 (0)578 571736
F. +31 (0)578 574135

info@bevaplast.nl | www.bevaplast.nl

Belangrijk:

Bij alle vervuilingen dient het oog met een zachte en gelijkmatige straal gespoeld te worden. De oogspoelfles tijdens het spoelproces zachtjes indrukken. Bij elke oogverwonding- of vervuiling dient een arts geraadpleegd te worden. De spoeling dient ook onderweg naar de arts voortgezet te worden.

bedrijfsstempel